

# **GUV-I 512 (bisher 20.6)**

**Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband**

Heyestraße 99 • 40625 Düsseldorf

Postfach 12 05 30 • 40605 Düsseldorf

Telefon (02 11) 28 08-0 • Telefax (02 11) 29 80-54

## **Merkblatt für Erste-Hilfe-Material**

**Ausgabe Mai 1998**

# Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines .....	3
2	Notwendiger Vorrat .....	4
3	Inhalt der Verbandkästen .....	5
4	Aufbewahrung .....	9
5	Kennzeichnung .....	10
6	Zusätzliche Mittel .....	11

## **Herausgeber**

Bundesverband der Unfallkassen  
Fockensteinstraße 1, 81539 München

Diese Ausgabe Mai 1998  
entspricht der Ausgabe Januar 1998  
von ZH 1/146 des ZH 1-Sammelwerkes  
der gewerblichen Berufsgenossen-  
schaften.

Bearbeitet vom Fachausschuß „Erste  
Hilfe“ der Berufsgenossenschaftlichen  
Zentrale für Sicherheit und Gesundheit  
(BGZ) des Hauptverbandes der gewerb-  
lichen Berufsgenossenschaften, Alte  
Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin.

# 1. Allgemeines

Zum Erste-Hilfe-Material zählen Verbandstoffe, alle sonstigen Hilfsmittel und medizinischen Geräte sowie Arzneimittel, soweit sie der Durchführung der Ersten Hilfe dienen.

In Betrieben sind mindestens diejenigen Verband- und Hilfsmittel vorrätig zu halten, die in einem

- großen Verbandkasten, z.B. nach DIN 13 169 „Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E“,  
oder
- kleinen Verbandkasten, z.B. nach DIN 13 157 „Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten C“

enthalten sind.

Verbandmittel können auch in anderen Behältnissen, z.B. Verbandsschränken, bereitgehalten werden.

## 2. Notwendiger Vorrat

Hinweise auf Art und Menge der vorrätig zu haltenden Verband- und Hilfsmittel sind in den Durchführungsanweisungen zu § 5 der UVV „Erste Hilfe“ (GUV o.3) und in der Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 39/1,3 „Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ enthalten.

Je nach Größe des Betriebes müssen nach der Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 39/1,3 zur Verfügung stehen:

Betriebsart	Zahl der Beschäftigten	Verbandkasten	
		Kleiner	Großer <sup>*)</sup>
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1-50	1	
	51-300		1
	ab 301 für je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandkasten		2
Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	1-20	1	
	21-100		1
	ab 101 für je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandkasten		2
Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen	1-10	1 <sup>**)</sup>	
	11-50		1
	ab 51 für je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer Verbandkasten		2

\*) Zwei kleine Verbandkästen ersetzen einen großen Verbandkasten.

\*\*\*) Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten z.B. nach DIN 13 164 als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Bezugsquellen für Verbandkästen können erfragt werden bei den örtlichen Stellen der Hilfsorganisationen, wie Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser-Hilfsdienst (MHD). Für Großbestellungen sind Herstelleranschriften zu erfragen beim Bundesfachverband Medizinprodukteindustrie e.V. (BVMed), Hasengartenstraße 14c, 65189 Wiesbaden, Telefon (06 11) 71 40 38, Telefax (06 11) 71 97 69.

### 3. Inhalt der Verbandkästen

lfd. Nr.	Stückzahl kleiner Verband-kasten	Stückzahl großer Verband-kasten	Benennungen oder Bezeichnungen	Ausführung Bemerkungen und Hinweise
1	1	2	Heftpflaster	500 cm x 2,5 cm, Spule mit Außen-schutz, z.B. DIN 13 019
2	8	16	Wundschnell-verband	staubgeschützt verpackt 10 cm x 6 cm, z.B. DIN 13 019
3	5	10	Fingerkuppen-verband	staubgeschützt verpackt
4	5	10	Wundschnell-verband	staubgeschützt verpackt 18 cm x 2 cm, z.B. DIN 13 019
5	10	20	Pflasterstrip	Mindestgröße 1,9 cm x 7,2 cm, staubgeschützt verpackt
6	3	6	Verband-päckchen	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten, mindestens zofädig, 400 cm x 8 cm mit Wundkomresse 10 cm x 8 cm auf der Binde befestigt, Wundkomresse als einlagiges oder mehrlagiges Flächengebilde, Oberfläche nicht saugend, sekretdurchlässig, nicht an der Wunde haftend, physio-logisch unbedenklich, mindestens Saugkapazität 800g/m <sup>2</sup> , keine op-tischen Aufheller, steril verpackt, z.B. DIN 13 151-M
7	2	4	Verband-päckchen	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten, 400 cm x 10 cm mit Wundkomresse 10 cm x 12 cm, sonst wie lfd. Nr. 6, z.B. DIN 13 151-M

lfd. Nr.	Stückzahl kleiner Verbandkasten	Stückzahl großer Verbandkasten	Benennungen oder Bezeichnungen	Ausführung Bemerkungen und Hinweise
8	1	2	Verbandtuch	80 cm x 60 cm, keine optischen Aufheller, physiologisch unbedenklich, ein- oder mehrlagiges Flächengebilde, Oberfläche nicht saugend, sekretdurchlässig, nicht an der Wunde haftend, Saugkapazität mindestens 125 g/m <sup>2</sup> , z.B. DIN 13 152-A
9	1	2	Verbandtuch	60 cm x 40 cm, sonst wie lfd. Nr. 8, z.B. DIN 13 152-BR
10	6	12	Kompresse	10 cm x 10 cm, ein- oder mehrlagiges Flächengebilde, Oberfläche nicht saugend, sekretdurchlässig, nicht an der Wunde haftend, physiologisch unbedenklich, Saugkapazität mindestens 800 g/m <sup>2</sup> , maximal paarweise steril verpackt, Papier, z.B. DIN 58 953-2
11	2	4	Augenkompre- sse	aus Watte mit textilem Gewebe oder Fliesstoff umhüllt, oval, Mindestgröße 5 cm x 7 cm, Gewicht mindestens 1,5 g/Stück, einzeln verpackt
12	1	2	metallisierte Polyesterfolie als Rettungsdecke	Oberfläche Aluminium, Rückseite farbig, Mindestgröße 210 cm x 160 cm, Mindestfoliendicke 12 µm, staubgeschützt verpackt
13	3	6	Fixierbinde	400 cm x 6 cm, starr oder elastisch, mit festen Kanten, mindestens 20fädig, einzeln staubgeschützt verpackt, z.B. DIN 61 634-FB6

lfd. Nr.	Stückzahl kleiner Verbandkasten	Stückzahl großer Verbandkasten	Benennungen oder Bezeichnungen	Ausführung Bemerkungen und Hinweise
14	3	6	Fixierbinde	400 cm x 8 cm, sonst wie lfd. Nr. 13, einzeln staubgeschützt verpackt, z.B. DIN 61 634-FB8
15	1	2	Netzverband für Extremitäten	mindestens 4 m gedehnt
16	1	2	Dreiecktuch	96 cm x 96 cm x 136 cm, aus textilem Gewebe oder einlagigem Flächengebilde mit festen Kanten, Gewebe in Leinwandbindung mit einer Fadendichte von mindestens 260 Fäden/cm <sup>2</sup> in Kette und Schuß oder einlagiges Flächengebilde mit einer Höchstzugkraft in Längs- oder Querrichtung von mindestens 50N/5 cm, staubgeschützt verpackt, z.B. DIN 13 168-D
17	1	1	Erste-Hilfe-Schere	kniegebogen, mindestens 18 cm lang, nichtrostend, z.B. DIN 58 279-B 190
18	10	20	Vliesstoff-Tuch	Mindestgröße 20 cm x 30 cm, flächenbezogene Masse: mindestens 15 g/m <sup>2</sup>
19	2	4	Folienbeutel	verschließbar, aus Polyethylen, Mindestgröße 30 cm x 40 cm, Mindestfoliendicke 45 µm
20	4	8	Einmalhandschuh	entsprechend den Festlegungen für Pflegehandschuhe aus PVC, nahtlos, groß, staubgeschützt verpackt, z.B. DIN EN 455 Teil 1 und Teil 2

Ifd. Nr.	Stückzahl kleiner Verband-kasten	Stückzahl großer Verband-kasten	Benennungen oder Bezeichnungen	Ausführung Bemerkungen und Hinweise
21	1	1	Erste-Hilfe-Broschüre	Informationen zur Ersten-Hilfe-Leistung und Dokumentation, z.B. Broschüre „Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen“ der gewerblichen Berufsgenossenschaften
22	1	1	Inhaltsverzeichnis	

## 4. Aufbewahrung

Die Aufbewahrungsorte richten sich nach Unfallschwerpunkten, der Struktur des Betriebes (Ausdehnung, Räumlichkeiten, Betriebsarten, räumliche Verteilung der Arbeitsplätze) und den auf dem Gebiet des Rettungswesens getroffenen organisatorischen Maßnahmen.

Das Erste-Hilfe-Material muß jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, geschützt gegen schädigende Einflüsse (Verunreinigung, Nässe und extreme Temperaturen), in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Nach dem seit 1. Januar 1995<sup>\*)</sup> geltenden Medizinproduktegesetz müssen Verbandstoffe eine CE-Kennzeichnung tragen, bedürfen jedoch keiner Angabe eines Verfalldatums.

Ist dennoch ein Verfalldatum angegeben, verbietet das Medizinproduktegesetz unter Androhung eines Bußgeldes die weitere Anwendung nach Ablauf des Verfalldatums.

Erste-Hilfe-Material ohne Verfalldatum muß erst bei Verschmutzung oder Beschädigung ausgetauscht werden. Es ist – ausgenommen Pflastermaterial – bei sauberer und trockener Lagerung lange Zeit einsatzfähig.

\*) Es gilt eine Übergangsfrist bis 13. Juni 1998. Mit einer Verlängerung bis zum 30. Juni 2001 ist zu rechnen.


## 5. Kennzeichnung

Aufbewahrungsorte der Verbandsmittel sind deutlich erkennbar und dauerhaft durch ein weißes Kreuz auf quadratischem oder rechteckigem grünem Feld mit weißer Umrandung (Rettungszeichen „Erste Hilfe“) zu kennzeichnen.



E 06 Erste Hilfe

Auf den nächstgelegenen Aufbewahrungsort ist durch einen weißen, liegenden Pfeil auf rechteckigem grünem Feld mit weißer Umrandung zusammen mit dem Rettungszeichen „Erste Hilfe“ hinzuweisen.

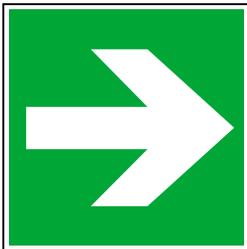

E 13 Richtungsangabe für  
Erste-Hilfe-Einrichtungen

Die Zeichen müssen der UVV „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV 0.7) entsprechen; siehe auch § 12 UVV „Erste Hilfe“ (GUV 0.3).

## 6. Zusätzliche Mittel

Zusätzliches Erste-Hilfe-Material über den Inhalt des Verbandkastens hinaus ist aufgrund betriebsärztlicher Entscheidung oder betriebsbedingter Gefährdungen (z.B. Augenspülflaschen entsprechend den „Richtlinien für Laboratorien“ [GUV 16.17]) bereitzuhalten.

Bei betriebsspezifischen Gefahren, z.B. im Hinblick auf das Einwirken gefährlicher chemischer Stoffe, können Arzneimittel oder Sauerstoff zum Erste-Hilfe-Material gehören. Diese dürfen ausschließlich vom Arzt oder von besonders ärztlich eingewiesenem Personal angewandt werden.

Arzneimittel, die nicht für die Erste-Hilfe-Leistung notwendig sind, z.B. Schmerztabletten, gehören nicht zum Erste-Hilfe-Material und damit auch nicht in die Verbandkästen.

In Zweifelsfällen gibt der Betriebsarzt, der für den Betrieb zuständige Arbeitsmedizinische Dienst oder der Technische Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaft Auskunft.

Zur Ausstattung von Sanitätsräumen siehe „Merkblatt für Sanitätsräume in Betrieben“ (GUV 20.12).